


EX. バイタルデザイン シューヘルパー 取扱説明書

※取扱説明書は大切に
保管して下さい。

EX. バイタルデザイン シューヘルパーをお買い上げ賜り、誠に有難うございます。
ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用下さい。

特 徴

- シューヘルパーが体を支えますから、バランスを崩さず、腰も曲げずに楽に靴を履けます・脱げます。
- エレガントな外観ですから玄関のインテリアにマッチ、どこにでも置ける自立式。

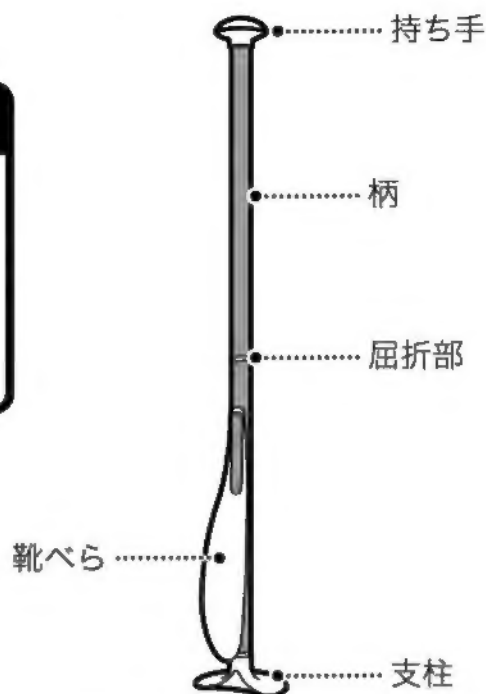


組み立て方法

- ① 持ち手の端と靴べら部の下の部分を両手で持ち、屈折部を合わせてまっすぐにします。
- ② パイプの中には、伸縮性のゴムが入っていますから、自然に上下部分が接合されます。
- ③ ゴムには弾力があり、接合されると時に強く引っ張りますから、接合部に指を挟まれないようご注意ください。
- ④ 接合部がしっかりとまって、まっすぐになり、折れないことを確認してから普通の靴べらのように使用して下さい。

使用方法


靴を履くとき

- ① 靴べらの部分を靴に入れます。
- ② 靴べらの上部を手のひらでしっかり押さえながら、足を靴の中へ入れます。
- ③ 足が靴の中へ入ってから、靴べらを引き抜きます。

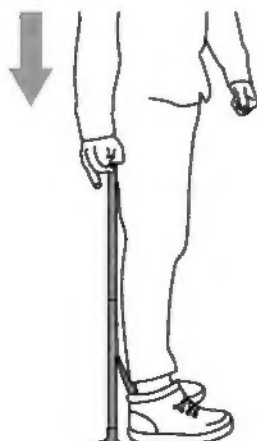

靴を脱ぐとき

- ① 靴べらをかかとと靴の間に入れます。
- ② 靴べらの上部をしっかりと下の方へ押し、靴を固定します。
- ③ 足を靴から引き出します。

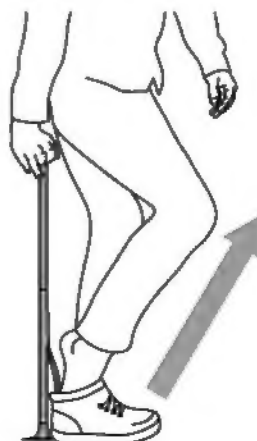

▲ 使用上の注意

- 接続部分に手を挟まないよう、ご注意ください。
- 柄にもたれたり、杖代わりには使用しないで下さい。
- 靴べらに斜めに体重をかけると転倒しやすくなりますので、ご注意ください。
- 靴を履いている状態で靴べらを靴に入れる際には、ズボンの裾を靴の中に巻き込まないようにご注意ください。
(スソを少したくし上げると楽に入ります)

仕 様

- サイズ(約)：長さ75 × 直径10cm
- 重 量(約)：450g
- 材 質：アルミニウム、ステンレススチール、ABS樹脂、木材
- デザイン：ノルウェー
- 原 産 国：台湾

※本仕様は改善や改良のために予告なく変更されることがあります。
※包装やカタログの色と実物の色とは、印刷の都合により異なることがあります。

保証規程 持込修理

取扱説明書に従い、正しく使用されたにも関わらず、製品に故障や不具合が生じた時は、下記規程に従い製品保証をさせていただきますので、当社お客様相談室宛ご連絡下さい。

保 証 期 間：お買上(領収書又は納品書の日付)後6ヶ月間。修理又は交換後も、保証期間は当初お買上日より6ヶ月間と致します。

提 示 書 類：お買上時の領収書、送り状又は納品書をご提示下さい。ご提示が無い場合は保証致しかねますので、関係書類を大切に保管して下さい。

補 償 範 囲：故障や不具合の原因が製品不良と判断された場合は、保証期間内は、修理又は同等の代替品と交換させていただきますが、それ以上の責任は負いかねますのでご了承下さい。又、保証期間後に不具合が発生し、修理が不可能な商品につきましては、同等の新しい商品を特別価格にて提供させて頂くこともございます。

持 込 修 理：修理をご希望の場合は、下記初期不良を除き、当社又はお買上店へお持込み頂くか、お客様のご手配で当社宛に商品をご送付頂く持込修理となっておりますのでご了承下さい。ご希望の場合は、送料お客様ご負担で当社にて引取り手配を致しますので、その旨お伝え下さい。修理後のお客様への返送は原則として当社負担にて手配させていただきます。

初 期 不 良：お買い上げ後2週間以内に判明した初期不良の場合は、当社にて商品を引き取り、無償にて修理又は交換後、お客様へ返送させていただきます。

下記の場合には保証期間内でも有償修理とさせていただきます。

- | | |
|---|--------------------------------|
| ① お客様による改造・加工や修理を起因とする故障。 | ④ ご使用後の外装面の傷、破損、外装部品、付属品の交換。 |
| ② 不適当な取扱いまたは使用による故障。 | ⑤ 取扱説明書通りに正しく使用されなかった場合。 |
| ③ 火災、地震、水害、異常気象他天変地異等、原因が本製品以外の理由による故障又は損傷。 | ⑥ お買い上げを証明するレシート・納品書等の提示がない場合。 |

EX. バイタルデザイン シューヘルパー
日本総代理店・輸入総発売元

健康・快適を世界から
株式会社 **メテックス**

〒106-0044 東京都港区東麻布 1-17-9
TEL 03-3589-3300 www.metex.co.jp/

お客様相談センター

TEL: 03-3589-4555
(土・日曜、祝祭日・正月期間を除く 平日9:30~17:30)
FAX: 03-3589-5500 (24時間受付)
E-mail: metex-master@metex.co.jp